


# MULTIZAMM

Válvula de segurança bidirecional



Suporte móvel opcional

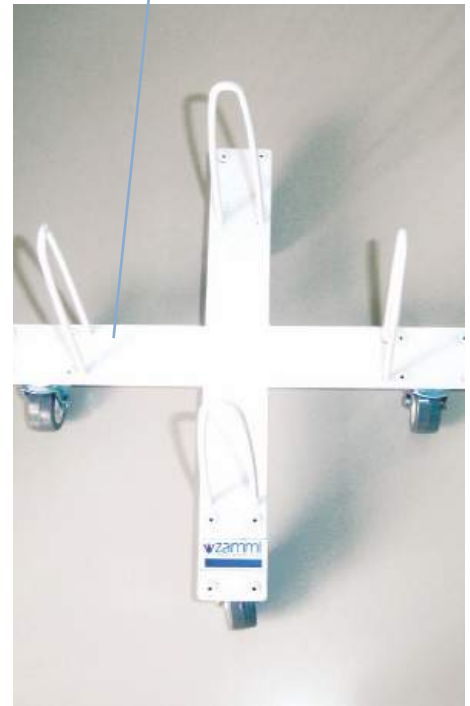

Frasco rígido de PVC cristal, graduado de 100/100ml, com capacidade de 3.500 e 5.000ml. Tampa com rosca rápida com válvula de segurança para pressão de aproximadamente 17polHg e válvula com dupla função: antirrefluxo e filtro bacteriológico. Com duas extensões de PVC cristal com 2,5m, com identificação paciente/vácuo, dispõe, em cada extensão, de um clamp, um conector universal de PVC e um adaptador de 1/4" na via de aspiração, com suporte móvel opcional.

#### Indicação:

> Coleta de secreções e expurgo, através de aspiração.

#### Diferenciais:

- > Proporciona maior segurança ao paciente e à equipe;
- > Elimina a necessidade de desencrostação, limpeza e desinfecção/esterilização dos frascos de vidro;
- > Evita acidentes com material perfurocortante contaminado;
- > A válvula de dupla ação (válvula Plus) filtra o ar aspirado com a redução da passagem de bactérias para a rede de vácuo em até 99,7% e interrompe a aspiração quando é atingido o nível máximo do frasco, evitando totalmente a contaminação da rede de vácuo;
- > O produto também pode ser fornecido em três vias (terceira via exclusiva para o anestesista);
- > Opcionais avulsos: tampa, tampa com extensões e frasco;
- > Material atóxico e descartável;
- > Material esterilizado em ETO.

